

搅拌器

MAZELA®

Stirrer NZC-1000型系列

标准配置了电机净化空气接入口（防止腐蚀）

- 在最大设计搅拌力矩内工作时，通过搅拌速度反馈控制保持搅拌速度的稳定。当搅拌力矩大于最大设计搅拌力矩时，搅拌器会自动降低搅拌速度，仍然保持搅拌的能力。是一种独特的两段式搅拌控制模式。保证了样品搅拌的安全性。
- 主机采用DC无刷电机，脉冲数字计数模式，搅拌速度计数更加准确。
- 由于采用了无刷电机，所以工作时不会产生电火花，也不会有碳刷磨损和更换的情况。
- 配备了防止搅拌电机烧损的过热保护器，电流限制电路，独立电源开关等的安全功能。
- 主机后侧标准配置了空气净化口，通过向电机内供给干净的空气，可防止溶剂和酸性气体的侵入，保证电机内部不受腐蚀。
- 搅拌棒可以采用手动旋紧方式也可以采用工具固定的方式。



NZC-1000



手机“扫一扫”
浏览更多产品和促销信息。

■操作部



■空气净化口 (本体背面)



通过向电机内供给干净的空气，可防止溶剂和酸性气体的侵入，保证电机内部不受腐蚀。

■保护盖板



搅拌电机标准配备了搅拌保护盖板，防止毛发等异物卷入电机内。

产品型号		搅拌器			
型号		NZC-1000	NZC-1100	NZC-1200	NZC-1300
产品代码No.		262066	262076	262086	262096
性能	搅拌速度范围 (rpm)	300~3000	120~1200	60~600	30~300
	最大力矩	N·m/rpm	0.098/3000	0.245/1200	0.49/600
kgf·cm/rpm		1/3000	2.5/1200	5/600	10/300
机能	转速控制	速度反馈控制方式			
	转速设定·显示	旋钮设定·数字显示			
	安全安全	过热保护器、电流限制电路、保护盖			
	附属机能	缓慢升·降搅拌速度、万向锁紧机构、空气净化口			
规格	电机·额定力矩	DC无刷电机 出力40W·0.098N·m (1kgf·cm) / 3000rpm			
	搅拌棒外径(mm)·锁紧机构	Φ1~8·可伸缩锁紧机构		Φ1~10·可伸缩锁紧机构	
	使用环境温度范围	5~35℃			
外部尺寸 (mm)·质量		92(104)W×130.5(143)D×189(200)H·2.5kg			
电源		1A, 200VA·AC220V 50Hz			

※上述是在室温20℃、标准电压、50Hz、无负荷时的测定值。


※搅拌棒·搅拌翼为非标准附属品，请另行选购。

※()内的尺寸是包含了突出部分的测量值。

附属品	夹具1个、紧固工具1个、保险丝2A 1个
-----	----------------------

测试数

■转速 (力矩特性)

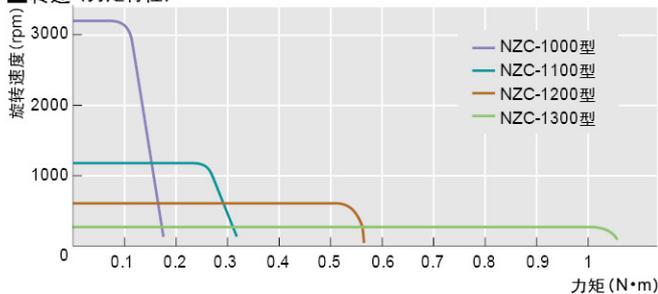

选购

底座 ZS型
立柱高度: 780mm
产品代码No. 158716

底座 ZS-2型
立柱高度: 1200mm
产品代码No. 203190

搅拌翼、搅拌棒、搅拌密封 (P.138)



EYELA

东京理化器械株式会社
东京都文京区小石川1-15-17 TN小石川大厦6层
TEL: +81-3-6757-3378 FAX: +81-3-3868-6571

埃朗科技国际贸易(上海)有限公司

上海办事处 上海市长宁区延安西路1088号长峰中心2906室
北京办事处 北京市朝阳区门外大街10号昆泰大厦1502A室
广州办事处 广州市天河区体育东路羊城国际商贸中心东塔1501室
成都办事处 成都市青羊区顺城大街306号凯乐广场903室
西安办事处 西安市碑林区文艺北路金色城市3栋1单元2706室

Tel: 021-62076878/31 62107271
Tel: 010-84264221/28
Tel: 020-38871910 38264610
Tel: 028-86511719
Tel: 029-87852182

Fax: 021-62076920
Fax: 010-84264233
Fax: 020-38871930
Fax: 028-86511803
Fax: 029-87852182
邮编: 200052
邮编: 100020
邮编: 510620
邮编: 610031
邮编: 710054

·由于产品需要不断的改良，因此这里所载产品的外观、规格有时会有变动。敬请理解。
·由于本产品简介是印刷品，因此所载产品的颜色有时会与实物有少许差异。敬请理解。

NZC1000-170406.SYYX.C



有关安全的
注意事项

为了使您安全地使用本产品，在使用之前，
请仔细阅读《使用说明书》